

Klaxon Mobility



the art of moving



Klick Electric Standard



| | |
|------------------------|---|
| Modello | Klick Electric Standard |
| Materiale | Alluminio |
| Motore | 36V x 370W brushless |
| Ruota | 14" copertone liscio |
| Display | LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo |
| Batteria | Litio 36V x 5,8 Ah (peso 1,3 kg) |
| Manubrio | Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione |
| Freni | Doppio freno a disco 160 mm con Electronic Brake System |
| Dimensioni | L 50 cm x H 90 cm x P 40 cm |
| Sistema di connessione | Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale) |
| Peso | 8,0 kg (esclusa batteria) |
| Autonomia | Circa 25 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante) |
| Accessori inclusi | Batteria 5,8 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafrangente |



Linking System Klaxon® - Brevetto Mondiale

EBS - Electronic Brake System

Con un tocco leggero della leva del freno si attiva il freno elettronico (EBS). La frenata EBS genera energia che ricarica automaticamente la batteria. Applicando una forza maggiore sulla leva del freno si attiva una ulteriore frenata, in questo caso, meccanica. In questa situazione i due sistemi di arresto si fondono in un'unica azione frenante.

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.





Klick Electric Tetra



| | |
|------------------------|---|
| Modello | Klick Electric Tetra |
| Materiale | Alluminio |
| Motore | 36V x 370W brushless |
| Ruota | 14" copertone liscio |
| Display | LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo |
| Batteria | Litio 36V x 5,8 Ah (peso 1,3 kg) |
| Manubrio | Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione, Comfort Drive System (azionamento facilitato dell'acceleratore e del freno tramite basculamento) |
| Freni | Doppio freno a disco 160 mm |
| Dimensioni | L 50 cm x H 95 cm x P 40 cm |
| Sistema di connessione | Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale) |
| Peso | 8,6 kg (batteria esclusa) |
| Autonomia | Circa 25 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante) |
| Accessori inclusi | Comfort Drive System, batteria 5,8 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafango |



Linking System Klaxon® - Brevetto Mondiale

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.





Klick Race Standard



| | |
|------------------------|--|
| Modello | Klick Race Standard |
| Materiale | Alluminio |
| Motore | 48V x 1000W brushless, ruota piena |
| Ruota | 14" copertone liscio |
| Display | LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, cruise control, passo d'uomo |
| Batteria | Litio 48V X 11 Ah (peso 3,0 kg) |
| Manubrio | Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione |
| Freni | Doppio freno a disco 160 mm con Electronic Brake System |
| Dimensioni | L 50 cm x H 90 cm x P 40 cm |
| Sistema di connessione | Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale) |
| Peso | 11,4 kg (batteria esclusa) |
| Autonomia | Circa 50 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante) |
| Accessori inclusi | Batteria 11 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafango |



Linking System Klaxon® - Brevetto Mondiale

EBS - Electronic Brake System

Con un tocco leggero della leva del freno si attiva il freno elettronico (EBS). La frenata EBS genera energia che ricarica automaticamente la batteria. Applicando una forza maggiore sulla leva del freno si attiva una ulteriore frenata, in questo caso, meccanica. In questa situazione i due sistemi di arresto si fondono in un'unica azione frenante.

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.





Klick Race Tetra



| | |
|------------------------|--|
| Modello | Klick Race Tetra |
| Materiale | Alluminio |
| Motore | 48V x 1000W brushless, ruota piena |
| Ruota | 14" copertone liscio |
| Display | LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo |
| Batteria | Litio 48V X 11 Ah (peso 3,0 kg) |
| Manubrio | Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione, Comfort Drive System: con basculamento "Push&Pull" si aziona la frenata e l'accelerazione |
| Freni | Doppio freno a disco 160 mm |
| Dimensioni | L 50 cm x H 95 cm x P 40 cm |
| Sistema di connessione | Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale) |
| Peso | 12,0 kg (batteria esclusa) |
| Autonomia | Circa 50 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante) |
| Accessori inclusi | Comfort Drive System, batteria 11 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafango |



Linking System Klaxon® - Brevetto Mondiale

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.





Klick Mini Standard



| | |
|------------------------|---|
| Modello | Klick Mini Standard |
| Materiale | Alluminio (con cover in carbonio standard) |
| Motore | 36V x 370W brushless, ruota piena |
| Ruota | 8" copertone liscio |
| Display | LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo |
| Batteria | Litio 36V x 5,8 Ah (peso 1,3 kg) |
| Manubrio | Manubrio e manopole pieghevoli |
| Freni | Freno disco singolo 140 mm |
| Ingombro massimo | (aperto) L 45cm x H 90cm x P 25cm |
| Ingombro minimo | (chiuso) L 25cm x H 65cm x P 25cm |
| Sistema di connessione | Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale) |
| Peso | 7,9 kg (batteria esclusa) |
| Autonomia | Circa 25 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante) |
| Accessori inclusi | Batteria 5,8 Ah con carica batteria, display LCD, cavalletto pieghevole |



Linking System Klaxon® - Brevetto mondiale

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.






klaxon-klick.com
KLAXON

Klick Carbon Standard



| | |
|------------------------|---|
| Modello | Klick Carbon Standard |
| Materiale | Aluminio (con cover in carbonio e luce led integrata) |
| Motore | 36V x 370W brushless, ruota piena |
| Ruota | 8" copertone liscio |
| Display | LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, passo d'uomo |
| Batteria | Litio 36V x 5,8 Ah (peso 1,3 kg) |
| Manubrio | Manubrio e manopole pieghevoli |
| Freni | Freno disco singolo 140 mm |
| Ingombro massimo | (aperto) L 45cm x H 90cm x P 25cm |
| Ingombro minimo | (chiuso) L 25cm x H 65cm x P 25cm |
| Sistema di connessione | Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale) |
| Peso | 7,9 kg (batteria esclusa) |
| Autonomia | Circa 25 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante) |
| Accessori inclusi | Batteria 5,8 Ah con carica batteria, display LCD, luce a led integrata, cavalletto pieghevole |

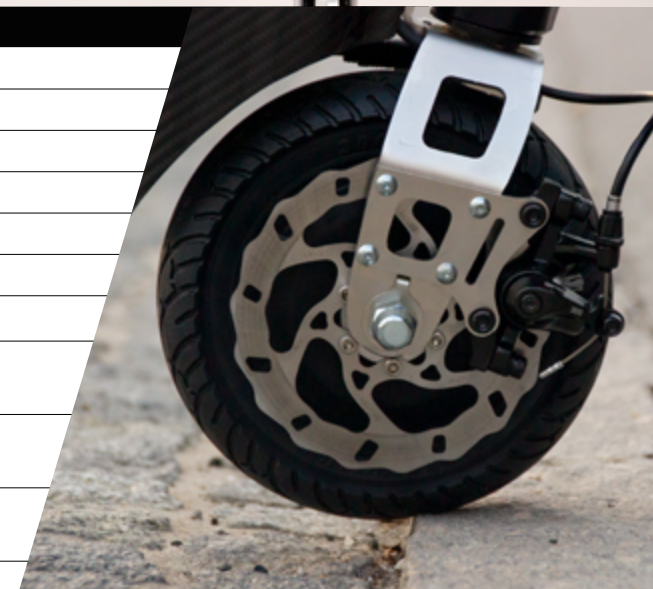

Linking System Klaxon® - Brevetto mondiale

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.






Klick Monster Standard



| | |
|------------------------|--|
| Modello | Klick Monster Standard |
| Materiale | Alluminio |
| Motore | 48V x 1000W brushless |
| Ruota | 20" copertone XL |
| Display | LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate, cruise control, passo d'uomo |
| Batteria | Litio 48V x 11 Ah (peso 3,0 kg) |
| Manubrio | Alluminio, regolabile in altezza e inclinazione |
| Freni | Doppio freno a disco 160 mm con Electronic Brake System |
| Dimensioni | L 50 cm x H 90 cm x P 50 cm |
| Sistema di connessione | Klick Linking System Klaxon® (Brevetto mondiale) |
| Peso | 15,0 kg (batteria esclusa) |
| Autonomia | Circa 40 km (velocità livello 1, su percorso pianeggiante) |
| Accessori inclusi | Batteria 11 Ah con carica batteria, retromarcia, display LCD, campanello, cavalletto pieghevole, parafango |

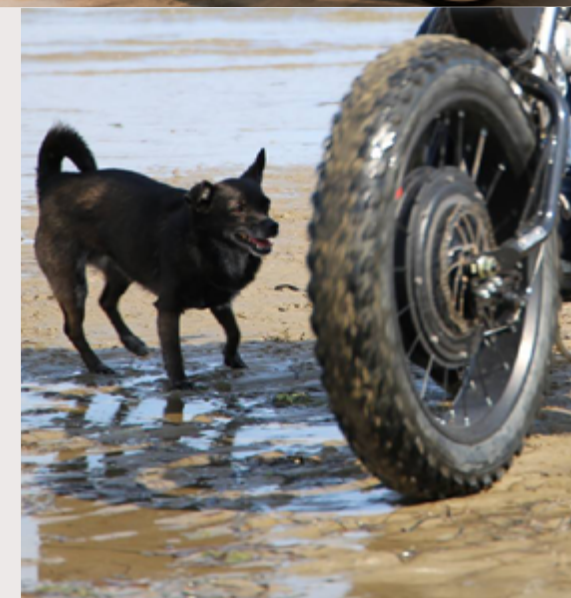

Linking System Klaxon® - Brevetto mondiale

EBS - Electronic Brake System

Con un tocco leggero della leva del freno si attiva il freno elettronico (EBS). La frenata EBS genera energia che ricarica automaticamente la batteria. Applicando una forza maggiore sulla leva del freno si attiva una ulteriore frenata, in questo caso, meccanica. In questa situazione i due sistemi di arresto si fondono in un'unica azione frenante.

"Passo d'uomo" - velocità pre-impostata

Ideale per una rilassante passeggiata in compagnia, selezionando la velocità a "passo d'uomo" si mantiene costante la velocità a 4,5 km/h.





Klick Hybrid Standard

| | |
|------------------------|--|
| Modello | Klick Hybrid Standard |
| Materiale | Alluminio |
| Motore | 48V x 500W brushless |
| Ruota | 20" copertone liscio |
| Display | LCD Multifunzione, 5 velocità preimpostate |
| Batteria | Litio 48V x 11 Ah (peso 3,0 kg) |
| Manubrio | Alluminio, regolabile in altezza |
| Freni | Doppio freno a disco 160 mm |
| Dimensioni | L 60 cm x H 125 cm x P 50 cm |
| Sistema di connessione | Klick Linking System Klaxon® (brevetto mondiale) |
| Peso | 18,0 kg (batteria esclusa) |
| Autonomia | Circa 50 km (in modalità elettrica, velocità livello 1, su percorso pianeggiante) |
| Rapporti | 9 x 1 |
| Accessori inclusi | Batteria 11 Ah con carica batteria, LCD display, porta USB, cavalletto pieghevole, parafango |



Linking System Klaxon® - Brevetto mondiale



Veloce e facile da collegare

L'innovativo sistema brevettato permette di collegare e scollegare il KLICK in pochi secondi e in completa autonomia, per una mobilità indipendente.



Sistema di aggancio universale

I prodotti Klaxon-KLICK sono collegabili ad ogni carrozzina manuale, sia rigida sia pieghevole, grazie all'innovativo sistema di aggancio brevettato. Scopri una nuova sensazione di libertà senza rinunciare al comfort di muoverti con la tua carrozzina.



Adatto ad ogni uso

I prodotti Klaxon-KLICK garantiscono sicurezza e tenuta di strada su terreni difficili. Si muovono agevolmente in spazi ristretti, sono ideali per spostamenti veloci, per i tuoi momenti di svago e per lo sport.



*"Voglio avere un ricordo di...
tutti i luoghi del mondo..."*



Sicurezza e protezione

Grazie alla qualità dei materiali e alle prove tecniche di laboratorio, il KLICK è stato progettato e realizzato per accompagnarti in piena sicurezza e autonomia.



Leggero e maneggevole

Con KLICK scoprirai una nuova sensazione di libertà, superando agevolmente ostacoli, salite e percorsi sconnessi. Il KLICK ha un piccolo raggio di sterzata per muoversi agevolmente in spazi molto ristretti.



Compatto e trasportabile

Esplora nuove destinazioni, sperimenta nuove avventure, scopri il piacere di viaggiare. Come mai hai fatto prima!



1



19



18



16



15



13



17



14



12

Accessori

1 Mini Flybag - FLYBAG01

2 Standard Flybag - FLYBAG00

3 Batteria Race (48V x 11Ah) - CM-1-11AH
Versione Fly (48V x 5,8Ah) - CM-1-5AH

4 Batteria Slim (36V x 5,8Ah) - CC-1-5AH
Versione Fly (36V x 2,5Ah) - CC-1-2,5AH

5 Batteria Power(36V x 11Ah) - CC-1-11AH
Versione Fly (36V x 2,5Ah) - CC-1-2,5AH-G

6 Batteria Mini (36V x 5,8Ah) - MK-1-5AH
Versione Fly (36V x 2,5Ah) - MK-1-2,5AH

7 Batteria Hybrid (48V x 11Ah) - CH-1-11AH

8 Pipa manubrio regolabile a sgancio rapido
CC-23-22-24-0001

9 Guanti Klaxon- GLOVES

10 Pesi aggiuntivi - CC-93-0000

11 Porta cellulare - PHONE-HOLDER

12 Luce Standard- C9F008

13 Luce anteriore MONSTER/RACE
CC-83-KIT

14 Prolunga manubrio Std - CC-25-0005
Prolunga manubrio Tetra - CC-25-0004

15 Carica batteria Race - CC-88-0001

16 Carica batteria Power - CC-88-0000
Carica batteria Hybrid - K500050

17 Carica batteria Slim - CC-89-0000
Carica batteria Mini - MK-88-0000

18 Set di ruote maggiorate
FATWHEELS

19 Copertone 14" - CC-3-1400



2



3



4



5



6



7



8



10



9

Linking System Klaxon®

Brevetto Mondiale



Con lo stesso innovativo sistema di aggancio è possibile collegare tutti i prodotti della gamma KLICK in pochi secondi. Il sistema può essere facilmente allestito su ogni tipo di carrozzina manuale, rigida o pieghevole, garantendo sicurezza e affidabilità. Aggiungi alla tua carrozzina nuove funzionalità, senza rinunciare alla maneggevolezza e alla leggerezza.

ALLINEA. AGGANCIATA. KLICK.


VELOCE
da collegare



PRONTO
in pochi secondi



ADATTO
ad ogni modello di carrozzina

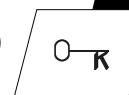

www.klaxon-klick.com

info@klaxon-klick.com



Facebook:
[@KlaxonKlickWorld](https://www.facebook.com/KlaxonKlickWorld)

Instagram:
[@KlaxonKlick](https://www.instagram.com/KlaxonKlick)